

ScopeFlowCap & ScopeFlush

Plus que jamais, l'utilisation de **dispositifs à usage unique ou jetables** est indispensable pour limiter au maximum les risques d'infections et de contaminations croisées.

A travers les gammes **ScopeFlowCap** et **ScopeFlush**, vous pourrez **substituer vos tubulures, flacons et accessoires réutilisables par des dispositifs jetables**.



ScopeFlowCap

- ▶ Tubulures d'insufflation Air/CO₂ et d'irrigation

Compatibles avec toutes marques d'endoscopes digestifs



ScopeFlush

- ▶ Tubulures d'irrigation pour pompes de lavage
- ▶ Connecteurs pour canal jet d'eau auxiliaire

Compatibles avec la quasi totalité de pompes de lavage


ScopeFlowCap

ScopeFlowCap contribue à maîtriser le risque infectieux en endoscopie digestive, et plus particulièrement, le risque de contamination croisée entre patients.

Stérile, prête à l'emploi et jetable, la tubulure d'insufflation Air/CO₂ et d'irrigation, **ScopeFlowCap**, se visse directement sur une bouteille d'eau stérile, pour ensuite se connecter au port d'insufflation et d'irrigation de l'endoscope, permettant ainsi :

- ▶ Le nettoyage de la lentille durant l'examen endoscopique
- ▶ L'insufflation d'air ou de CO₂ pour favoriser la progression de l'endoscope

Compatible avec la majorité des endoscopes digestifs disponibles sur le marché, **ScopeFlowCap** est l'alternative aux flacons et tubulures réutilisables qui représentent une source potentielle de contamination.

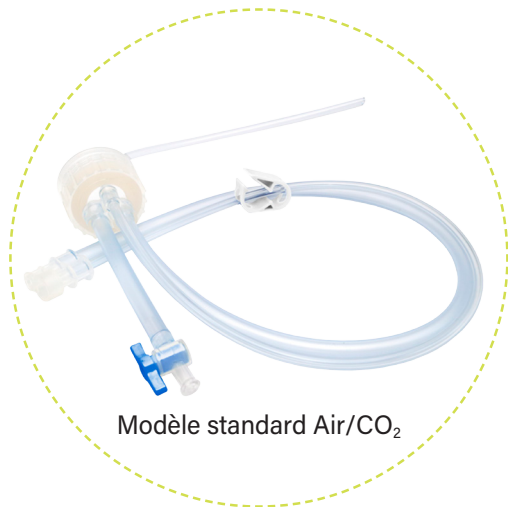


Modèle standard Air/CO₂



Modèle Air/CO₂ avec extension CO₂



utilisation
24h00

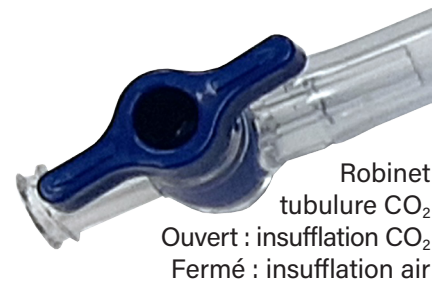

Robinet
tubulure CO₂
Ouvert : insufflation CO₂
Fermé : insufflation air

Compatibilité endoscopes digestifs :



Olympus®



Pentax®



Fujifilm® séries 500/600




Fujifilm® série 700

ScopeFlush

La tubulure d'irrigation **ScopeFlush** 24H00, associée au connecteur pour canal jet d'eau auxiliaire à usage unique, est la solution aux systèmes réutilisables pour encore et toujours réduire les risques de contamination.

Utilisés avec une pompe de lavage, la tubulure et les connecteurs **ScopeFlush** sont indiqués dans les cas suivants :

- ▶ Coloscopies, pour nettoyer le colon en cas de préparation insuffisante
- ▶ Lors d'hémorragies gastro-intestinales
- ▶ Lors de coloscopies réalisées sous insufflation d'eau au lieu d'air/CO₂

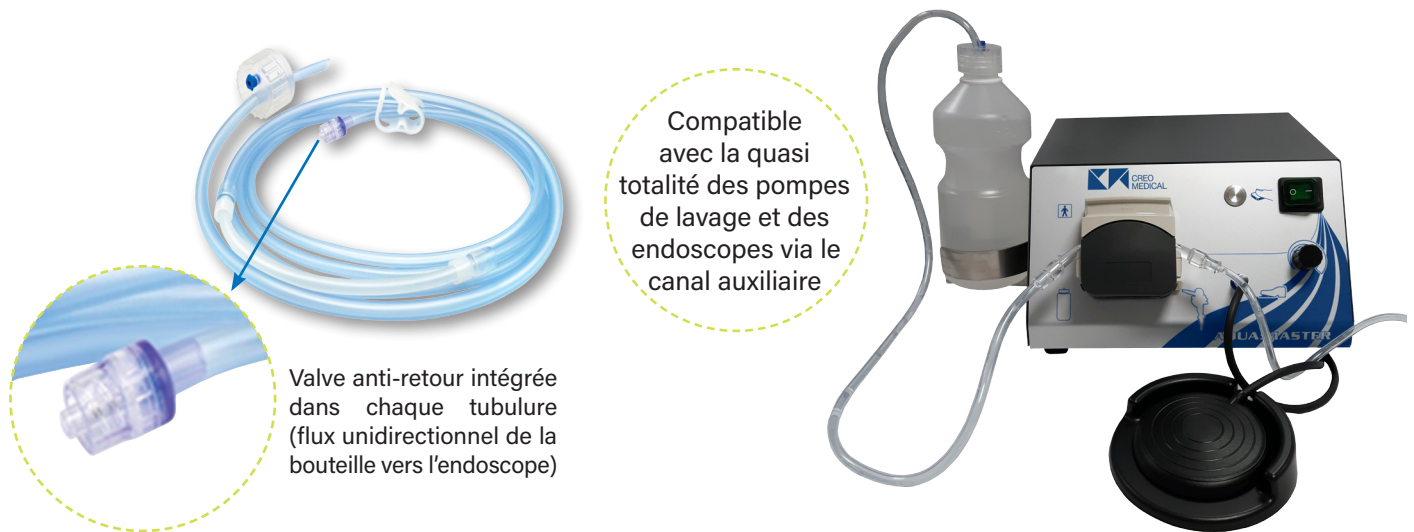


Connecteurs pour canal jet d'eau auxiliaire **ScopeFlush** à usage unique.

A utiliser avec les tubulures d'irrigation ENDO130 et ENDO230.



Toutes nos tubulures **ScopeFlowCap** et **ScopeFlush** sont :

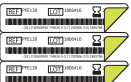- STERILE** ▶ **Stériles** : produit exempt de micro-organismes par lequel passera de l'eau stérile, via l'endoscope, jusqu'au patient.
-  ▶ **Pour une utilisation pendant 24 heures** : hygiène accrue, diminution des risques d'infections nosocomiales.
-  ▶ **Jetables** : produit toujours efficace et suppression des nettoyages et stérilisations longs et coûteux.
-  ▶ **Exemptes de Phtalates (plus particulièrement de DEHP) et de Bisphénol A** : répondant aux exigences des dernières recommandations et Directives Européennes et nationales, mais toujours et avant tout «**vers plus de sécurité pour les patients**».
-  ▶ Accompagnées de 3 étiquettes de **traçabilité** détachables autocollantes.

ScopeFlowCap - Tubulures d'insufflation Air/CO₂ et d'irrigation - STÉRILES - USAGE 24H00

Référence	Désignation	Compatibilité endoscopes digestifs	Cdt
ENDO145CO2SA	Tubulure d'insufflation Air/CO ₂ et d'irrigation	Olympus® séries 140/160/180/190/240/260/290	10
ENDO145CO2LB*	Tubulure d'insufflation Air/CO ₂ et d'irrigation avec extension CO ₂		
ENDO160CO2SB*	Tubulure d'insufflation Air/CO ₂ et d'irrigation	Pentax® série 90	10
ENDO160CO2LB*	Tubulure d'insufflation Air/CO ₂ et d'irrigation avec extension CO ₂		
ENDO165CO2SA	Tubulure d'insufflation Air/CO ₂ et d'irrigation	Fujifilm® séries 500/600	10
ENDO165CO2LB*	Tubulure d'insufflation Air/CO ₂ et d'irrigation avec extension CO ₂		
ENDO166CO2SA	Tubulure d'insufflation Air/CO ₂ et d'irrigation	Fujifilm® série 700	10
ENDO166CO2LB*	Tubulure d'insufflation Air/CO ₂ et d'irrigation avec extension CO ₂		
ENDO551	Tubulure d'administration pour CO ₂ (non stérile)		10
ENDO091	Tubulure d'administration pour CO ₂ avec valve anti-retour (non stérile)		20

* Tous les modèles avec extension CO₂ sont dotés d'une extension amovible permettant une insufflation à l'air si besoin.



ScopeFlush - Tubulures d'irrigation pour pompes de lavage - STÉRILES - USAGE 24H00

Référence	Désignation	Compatibilité pompes de lavage	Cdt
ENDO230	Tubulure d'irrigation pour pompes de lavage	Olympus®, Erbe™ EndoGator EGP-100E®	10
ENDO130	Tubulure d'irrigation pour pompes de lavage	Olympus® OFP2, EndoStratus® Pentax® Scope Assist™	10

ScopeFlush - Connecteurs pour canal jet d'eau auxiliaire - STÉRILES - USAGE UNIQUE

Référence	Désignation	Compatibilité endoscopes digestifs	Cdt
ENDO241	Connecteur pour canal jet d'eau auxiliaire	Olympus®	100
ENDO242	Connecteur pour canal jet d'eau auxiliaire	Pentax®	100
ENDO126	Connecteur pour canal jet d'eau auxiliaire	Fujifilm®	100

Dénomination: Tubulure d'insufflation Air/CO₂ et d'irrigation pour connexion directe entre l'endoscope et la bouteille d'eau stérile ScopeFlowCap. **Indications:** Alimentation des endoscopes en air ou CO₂ et en eau stérile pendant les interventions endoscopiques.

Dénomination: Tubulures d'irrigation pour pompes de lavage ScopeFlush **Indications:** Irrigation endoscopique gastro-intestinale

Dénomination: Connecteurs pour canal jet d'eau auxiliaire ScopeFlush **Indications:** Irrigation endoscopique gastro-intestinale.

Classe: IIa stérile. **Organisme notifié:** CE0123. **Fabricant:** GA Health Company Limited. **Bon usage:** Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation ou l'étiquetage du dispositif. **Remboursement:** Produits non inscrit à la LPPR. **Version:** SFC&SF_F_7. Rev.7 Date 21-03-24

Olympus® est une marque déposée d'Olympus Corporation; Pentax® est une marque déposée de Hoya Corporation; Fujifilm® est une marque déposée de Fujifilm Corporation, EndoGator® et EndoStratus® sont des marques déposées de Medivators Inc.; Erbe™ est une marque déposée de Erbe Elektromedizin GmbH.

Distribué en France par :

Creo Medical SASU

9, avenue Jean Prouvé

88101 Saint-Dié des Vosges

Email : info.fr@creomedical.com

Tél : + 33 3 29 58 45 45 / 46 46

