

# ScopeValve

Adaptadores para limpieza de canales de aire/  
agua y aspiración

Para la prelimpieza de  
endoscopios tras el  
procedimiento endoscópico

**Adaptador de limpieza para  
canales de aire y agua**

Para reducir la formación  
de biopelículas mediante la  
eliminación de contaminantes en  
los canales de aire y agua

**Adaptador de limpieza  
para puerto de biopsia**

Para reducir la formación  
de biopelículas mediante la  
eliminación de contaminantes  
en el puerto de biopsia



# ScopeValve

## Adaptadores para limpieza por aire/agua y aspiración


Se recomienda encarecidamente realizar una limpieza previa de cada endoscopio inmediatamente después del procedimiento, ya que la eliminación de las sustancias orgánicas presentes tras el examen es esencial para garantizar la eficacia de los pasos de limpieza posteriores y, por tanto, del resultado final de la desinfección.

Los adaptadores de limpieza del canal de aire/agua **ScopeValve** se utilizan para enjuagar el canal de aire/agua del endoscopio directamente después del procedimiento con el paciente, evitando la formación de biopelículas y minimizando el riesgo de contaminación cruzada.

El adaptador de limpieza del canal de aspiración se utiliza para aspirar líquidos de reprocesamiento a través del puerto del canal de instrumentos del endoscopio.

Estos dispositivos de un solo uso:

- ▶ Están listos para usar,
- ▶ Eliminan la limpieza manual y el reprocesamiento de válvulas y adaptadores reutilizables,
- ▶ Reducen la carga de trabajo del personal encargado de la limpieza de los endoscopios,
- ▶ Mejoran la seguridad del paciente con respecto a los posibles riesgos de contaminación.

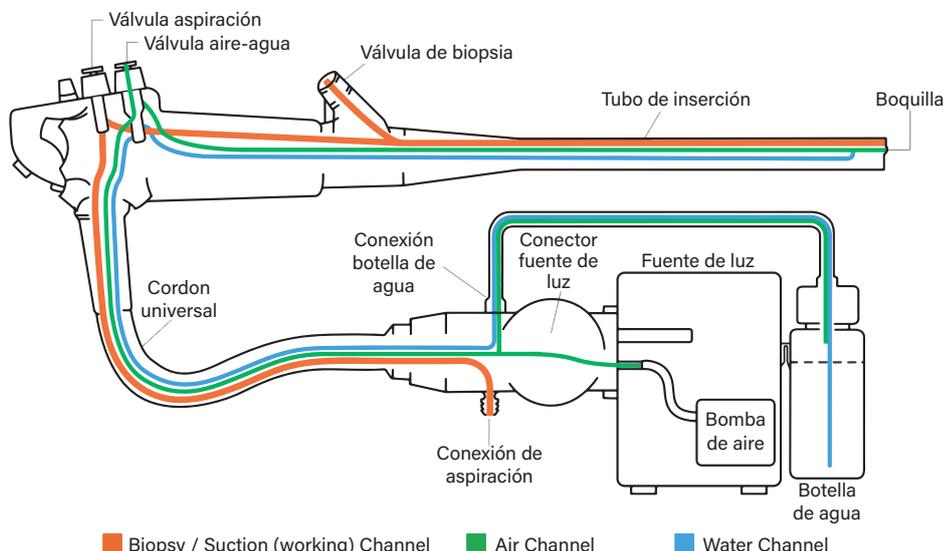

### Adaptadores de aire/agua y aspiración de un solo uso



ENDO038

ENDO105

ENDO075

ENDO3875

Referencia

Descripción

Cant.

ENDO038	Adaptador de limpieza para canal aire/agua para endoscopios Olympus®, no estéril	100
ENDO105	Adaptador de limpieza para canal aire/agua para endoscopios Fujifilm® serie 700, no estéril	100
ENDO075	Adaptador de limpieza para canal de aspiración para endoscopios Olympus®, no estéril	50
ENDO3875	Adaptador de limpieza para canal de aspiración + adaptador de limpieza para canal de aire/agua para endoscopios Olympus®, estéril	25

## Características



▶ **Un solo uso** para un producto siempre eficaz y una reducción significativa del riesgo de infecciones nosocomiales.



▶ **Trazabilidad:** 3 etiquetas autoadhesivas acompañan a cada dispositivo.

**Descripción:** Válvulas y adaptador de limpieza, ScopeValve. **Indicaciones:** Para limpieza de canales de aire/agua y aspiración de endoscopios. **Clase:** I no estéril **Organismo notificado:** Certificado de conformidad CE. **Fabricante:** GA Health Company Limited. **Uso adecuado:** Antes de usar, lea atentamente las instrucciones del prospecto o de la etiqueta del dispositivo. **Version:** SVA\_S\_1. Rev.01. Date 18-05-23

Distribuido en España por:

**Creo Medical S.L.**

Pol. Ind. Cordovilla, Calle D. N°1  
31191 Cordovilla, Navarra (España)

Tel.: +34 948 293 324

E-mail: info.es@creomedical.com

